



ELECTRONICA MEDICAL

by Electronica Technologies

Electronica Medical vous propose le dépistage à la carte, au service de la prévention

Offre de base



**L'exploration des fonctions
visuelle et auditive**

Option



SPIROMÈTRE

Option



ECG
(Electrocardiogramme)

Option



CHAMP VISUEL

Option



DERMATOSCOPE

LOGICIEL DE VISION LAGON

- Mis au point par une équipe de spécialistes des logiciels médicaux et validé par des experts de la fonction visuelle, **LAGON** permet une évaluation exhaustive de la performance visuelle subjective.
- **LAGON** permet d'effectuer les tests spécifiquement adaptés aux différents besoins. Pour cela, il est possible d'adapter des protocoles permettant le déroulement automatique des tests.
- **LAGON** est connecté avec les logiciels de dossiers patient informatiques.
- **LAGON** est installé et livré avec une tablette Microsoft® Surface Go 10" ou Microsoft® Surface Laptop 13".
- **LAGON** est conforme aux normes : CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN 60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971, EN ISO 10938, EN ISO 15104-1, EN 62304, NB-MED/2.2/Rec4.

TESTS DISPONIBLES


VISION DES FORMES

- Acuité visuelle : visions de près, intermédiaire et de loin. (Lettres, Anneaux de Landolt, E de rasquin, chiffres).
- Amétropie : Duochrome et Astigmatisme



TESTS DIVERS

- Grille d'Amsler, etc.

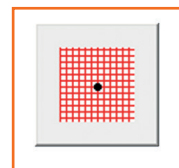



VISION DES COULEURS

- Planches chromatiques (Type Ishihara)
- Feux colorés (Avec un paramétrage variable en dimension et en durée).



VISION DU RELIEF

- Phories

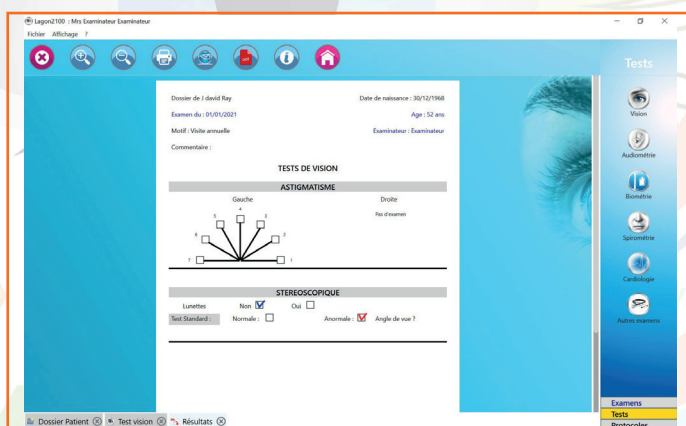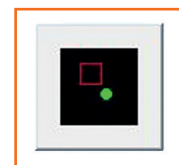

Impression des tests en pdf

Exploration sens chromatique planches pseudo isochromatiques, assistée par ordinateur : code CCAM BLQP016

AUDIOMÈTRE 800 M



GARANTIE 3 ANS (HORS CASQUES) : CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES



L'outil d'excellence professionnelle par **conduction aérienne**. Livré avec **bouton réponse patient** et un casque à haute isolation phonique Radioear DD65-V2



Fourni avec un **logiciel intuitif et interactif**, sans limitation du nombre d'installation ni de durée de validité



- **Exportation au format XML**
- **Interfaçable** avec la plupart des logiciels de la médecine du travail.
- **Compatible protocole GDT** (interfacé Doctolib Médecins)



- **Aide à l'interprétation** des audiogrammes,
- **Calcul** des pertes auditives,
- **Détermine les seuils d'audibilité** selon la méthode «Hughson-Westlake»



Branchement du casque à l'audiomètre avec **2 jacks monos** en 6,35 mm



Mode d'emploi au format pdf et aide en ligne : Anglais, Allemand, Italien, Français.

Audiométrie tonale : code CCAM CDQP010

Intégration de notre solution avec le logiciel de gestion de cabinet « Doctolib Médecins » (DLM)

ENRICHISSEZ VOS DIAGNOSTICS

Enrichissez votre champ de diagnostics grâce à nos solutions connectées à une interface unique via notre logiciel **LAGON**. Découvrez le spiromètre **MEDIKRO® Primo**, l'électrocardiogramme **SCHILLER® MS12 BLUE** ou USB avec le logiciel **CS-104**, le champ visuel automatisé **CV-2100** ou encore le Dermatoscope **FIREFLY DE350**.

● SPIROMÈTRE MEDIKRO PRIMO

Spiromètre de bureau connecté sur PC

Medikro Primo est un spiromètre compact, fiable et convivial. Il répond aux dernières normes de spirométrie et fournit des résultats précis auxquels les professionnels de santé peuvent se fier. Afin d'assurer une protection totale pour le patient, les capteurs sont à usage unique.

Le + : pas de branchement électrique nécessaire, il fonctionne en USB.

Spirométrie standard : code **CCAM GLQP012**



● ECG : MODÈLES MS12 BLUE OU USB

L'ECG MS-12 BLUE est un appareil léger, facile à utiliser, capable d'enregistrer 12 dérivations simultanément, avec défilement des 12 dérivations sur écran. Il propose un enregistrement des tracés sous format informatique. C'est un appareil de la marque SCHILLER, ce qui en garantit sa qualité et sa fiabilité.

Le + : l'ECG existe en version USB ou bluetooth.

ECG : code **CCAM DEQP003**



● LE CHAMP VISUEL CV-2100

Le CV-2100 permet de dépister les anomalies visuelles qui peuvent interagir dans l'exercice d'un métier et mettre la sécurité du patient en danger. Il comprend un système innovant de présentation par LEDs qui permet de tester le champ visuel temporal et nasal, à l'horizontal 140° (+/- 70°) et vertical 60° (+/- 30°).

Le + : seul campimètre automatique en médecine du travail à respecter la directive 2009/113/CE et 2006/126/CE et les arrêtés du 18 Déc. 2015, 31 août 2010 and 21 Déc 2005. Sa conception originale a fait l'objet d'un dépôt de brevet en 2013.

Campimétrie manuelle ou automatisée sans seuil : code **CCAM BLQP002**



● DERMATOSCOPE POLARISANT SANS FIL DE350

Le dermatoscope polarisant sans fil DE350 (Dermascope) est une caméra vidéo numérique à usage spécial combinée à une lentille polarisante à fort grossissement et à plusieurs LED ultra-lumineuses. C'est un outil polyvalent, facile à utiliser, notamment pour les examens cliniques, les cosmétiques, les soins de la peau et les études de médecine. Il est également utile comme endoscope folliculaire lors des greffes de cheveux, ainsi que pour les examens pré et postopératoires en chirurgie plastique.

Le + : Doté d'un grossissement optique 15x, cet appareil innovant diffuse des vidéos en direct, de haute qualité (à 30 ips) sur un ordinateur.

Dermoscopie : **CCAM QZQP001**

