



# ELECTRONICA MEDICAL

by Electronica Technologies



## Campimètre automatisé CV-2100



Il permet de dépister les **anomalies visuelles** qui peuvent interagir dans l'exercice d'un métier et mettre la **sécurité du patient** en danger. Il convient aux **médecins et orthoptistes** dans leur activité professionnelle quotidienne. *Acte remboursé.*





Caméra centrale pour le réglage de la position du patient et la surveillance de la fixation.



Ergonomie : mentonnière et appui-front.



Visualisation des résultats après chaque test.



L'appareil permet de tester le champ horizontal de  $+30^\circ$  et  $-30^\circ$




L'appareil permet de tester le champ vertical de  $+70^\circ$  et  $-70^\circ$



Seul appareil à répondre aux arrêtés du 18/12/2015, du 31/08/2010 et du 25/08/2009 et du texte européen du 25/08/2009

**PARAMÉTRAGE SPÉCIFIQUE POUR :**

- Les zones explorées : monoculaires, binoculaires, protocoles selon les types d'explorations et pathologies recherchées.
- La durée d'émission de la lumière.
- La méthode d'exploration: 100 % ou 2/3 ou manuelle ou algorithme de validation.
- La présence de leurres pour détecter les réponses automatiques et une caméra pour la fixation.
- La durée de réponse du patient.

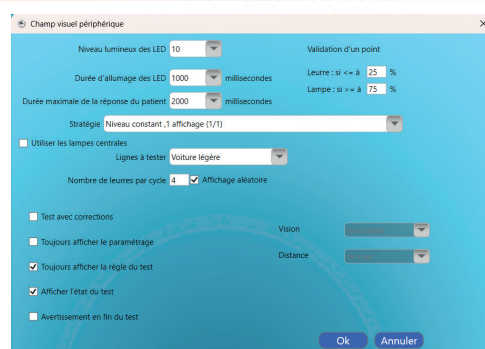

## INFORMATIONS TECHNIQUES

**Systèmes d'exploitation possibles :** Compatible avec Windows® 7, 8, 10 et 11.

**Alimentation :** Connexion USB.

**Configuration minimale du PC :** Une résolution minimale de 1366 x 768 et optimale de 1920 x 1080. Un espace libre minimum de 5 Mo sur le disque dur est requis.

**Système :** Système intégré avec le Logiciel LAGON de test de la vision et LAGON 2000.

**Normes :** CV-2100 est conforme aux normes CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN 60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971, EN ISO 10938, EN ISO 15104-1, EN 62304, EN 62366.